

Zaščitne rokavice Kid-Man®

i Navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo MORAJO biti predložena uporabniku izdelka. PRED uporabo tega izdelka je TREBA skrbno prebrati ta navodila za uporabo in jih shraniti za morebitno poznejšo uporabo.

Predvidena uporaba:



Osnovni postopki
in oddelki



Čiščenje



Ravnanje z živili

UVOD

- ▶ Spodnja navodila je treba uporabljati skupaj z informacijami, ki se nahajajo na embalaži.
- ▶ Pregledne in zaščitne rokavice za enkratno uporabo iz nitrila; brez pudra; nesterilne. Predvidno: Primerne za stik z živili (čas stika največ 30 minut, temperatura stika do največ 40 stopinj). Brez lateksa, pudra in DEHP/DOP. V skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (razred I.), Evropskimi standardi EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 in EN 455-4:2009, Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 (kategorija III.) ter Evropskimi standardi EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 in EN ISO 374-5:2016. Pred uporabo preverite, da rokavice niso poškodovane. Poškodovanih rokavic ne uporabljajte.
- ▶ Pravilno natikanje in snemanje rokavic je večšina, ki od zdravstvenih delavcev in drugih uporabnikov zahteva nekaj vaje. Da bi preprečili prenos okužb, je treba natikanje rokavic opraviti v pravilnem vrstnem redu. Preden si nadenete rokavice, poskrbite, da so vaše roke čiste. Pri snemanju rokavic pazite, da zunanja površina rokavic, ki je lahko kontaminirana s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami, ne pride v stik z vašo kožo. Izogibajte se raztegotovanju rokavic s silo, da zaradi nenadnega skrčenja ne pride do brizganja kontaminiranih snovi v oči, usta, na kožo ali druge ljudi, ki se nahajajo v vaši bližini.

SESTAVA/NEVARNE SNOVI

Snovi, ki se uporabljajo pri izdelavi rokavic, lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo alergijske reakcije. Nekatere rokavice lahko vsebujejo snovi, ki pri alergičnih osebah povzročijo draženje kože in/ali alergijsko reakcijo. V primeru alergijske reakcije se posvetujte z zdravnikom.

OZNAKE

Rokavice so osebna zaščitna oprema kategorije III. v skladu s Prilogo I k Uredbi 2016/425 in ustrezajo standardom: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.

- ▶ Vsaka enota vsebuje naslednje informacije: referenca izdelka, številka serije in datum izteka roka veljavnosti.
- ▶ Uporabljeni simboli v skladu s standardom EN ISO 15223: ustrezni simboli za oznake medicinskih pripomočkov, označevanje in obvezne informacije.

CE 2777

Organ, odgovoren za certificiranje in skladnost: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irska



EN ISO 374-5:2016
Ščiti pred virusi

Odpornost proti bakterijam in glivam - uspešno opravljeno. Odpornost proti virusom – uspešno opravljeno.
*Odpornost proti penetraciji je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na testni vzorec.

GLAVNE LASTNOSTI

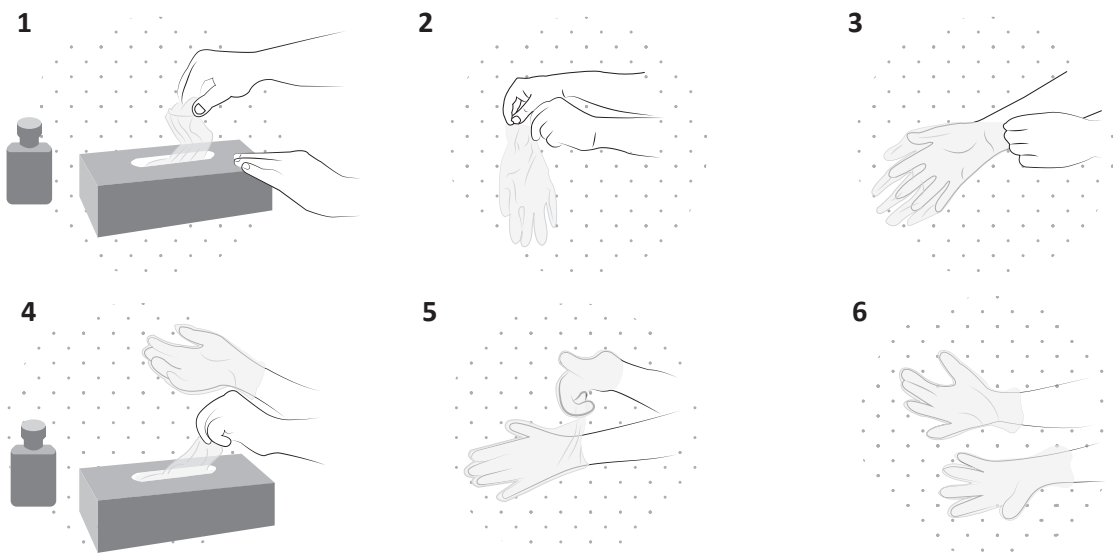
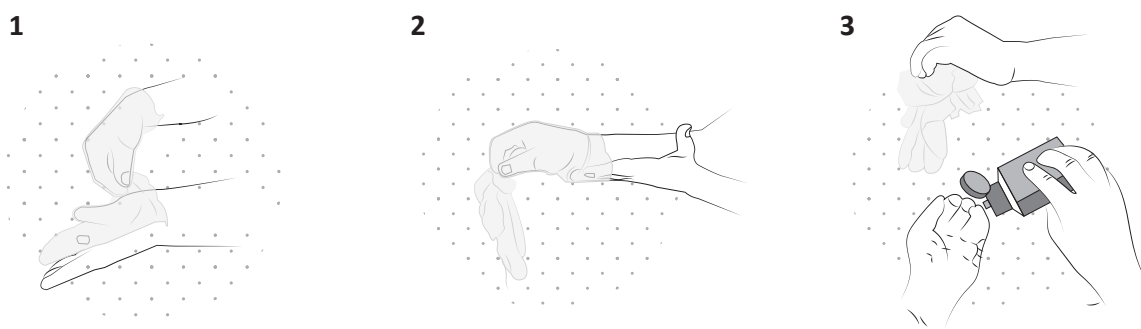
- ▶ Tanka nitrilna rokavica brez pudra, za uporabo na obeh rokah, z zvitim robom za dodatno ojačanje manšete
- ▶ Dobra zaščita pred virusi in različnimi kemikalijami
- ▶ Odlična otipna občutljivost, izboljšan oprijem v mokrem in suhem okolju zaradi mikroteksturiranih konic prstov
- ▶ Odlično prileganje, enostavno natikanje in snemanje
- ▶ Brez lateksa, pudra in beljakovin, dobra alternativa za osebe z alergijami tipa I
- ▶ Rokavice so primerne za stik z živili

MEDICINSKE	2017/745	RAZRED I.	EN 455	AQL 1.5
OVO	2016/425	KATEGORIJA III.	EN 374	AQL 1.5

- ▶ 100 kosov v škatli
- ▶ 10 škatel v velikem pakiranju
- ▶ 600 škatel na paleti

OSNOVNE INFORMACIJE

Velikost	Širina dlani	Celotna dolžina	Debelina		
			Dlan	Manšeta	Prst
XS 5-6	75 ± 5 mm	240 mm	Najmanj 0.08 mm	Najmanj 0.07 mm	Najmanj 0.10 mm
S 6-7	85 ± 5 mm				
M 7-8	95 ± 5 mm				
L 8-9	110 ± 5 mm				
XL 9-10	120 ± 5 mm				
XXL 10-11	130 ± 5 mm				

KAKO NATAKNITI ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO

KAKO PRAVILNO SNETI ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, virom ozona ali virom ognja.
Shranjujte v suhem in hladnem prostoru pri temperaturi od 5 do 38 °C. Ne hranite v neposredni bližini topil, olj, goriv in maziv.

ODLAGANJE


Odlagajte v skladu z veljavnimi predpisi.

SIMBOLI, UPORABLJENI NA EMBALAŽI

	Proizvajalec		Datum izdelave		Omejitev temperature		Glejte navodila za uporabo
	Številka serije		Datum izteka roka veljavnosti		Samo za enkratno uporabo		Recikliranje embalaže
	Številka izdelka		Hranite na suhem mestu		Nesterilno		S to stranjo navzgor
	Medicinski pripomoček		Ne izpostavljajte sončni svetlobi		Primerno za stik z živili		Previdno ravnanje
	Serijska številka						



UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilna, Litva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Telefonska številka +370 5 265 0000

Uvoznik/distributer v Romuniji: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr 2-2A, Braila Tel: +40 753 660066

Izdelano na Kitajskem
Zasnova: Kid-Man®

Izdajatelj UAB Kasko Group | Kid-Man®
Datum zadnje posodobitve 2026-01-05

